

Packaging / Shipping Instructions

Specimen Transport Materials

- ***Specimens for all tests are shipped at room temperature.***
- ***Each biohazard bag may contain only one patient sample.***

1 Place the labeled transport tube in the zippered pouch in the front of the biohazard bag with the absorbent pad. Seal the bag.

2 Place the completed Eurofins Diatherix Test Requisition in the flap pocket (no zipper) in the back of the biohazard transport bag.

Verify that the sample tube and the requisition are in the correct pouch:

- Requisition is located in the back side in the flapped pouch
- Specimen sample is located in the front side in the zippered pouch

3 Place the biohazard specimen bag(s), each containing only one sample, in the cardboard shipping box.

More than one specimen bag may be shipped in the same box.


4 Place the cardboard shipping box into the FedEx® UN 3373 Clinical Pak and seal it.

More than one box may be placed in the Clinical Pak.

5 Apply the barcoded shipping label to the FedEx® UN 3373 Clinical Pak. Retain the confirmation label for your records.

6 Call **1.800.463.3339** (1-800-GOFEDEX). Listen to the automated system and state “Schedule a pickup”. Your package weight is **less than 1 lb.** and uses a label that **does not contain a stamp**. You will not need to provide a FedEx Account Number. However, you will be asked for the tracking number on the FedEx label and confirmation of your delivery address and phone number. In conclusion, you will receive a pick up time that can be changed, and a confirmation number that should be retained.

If your package cannot be picked up, it may be placed in a FedEx® Drop Box. A FedEx® Drop Box can be located by calling FedEx® or going to FedEx.com. Do not take this package to a FedEx® Office location as they will not accept this type of shipment.

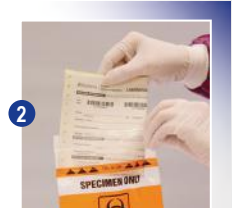


TIP: For your records, write the pickup confirmation number in the space provided on the confirmation label.

Instrucciones De Empaque Y Envío

Materiales de Transporte de Muestras

- Los especímenes para todos de análisis se envían a temperatura ambiente.
- Cada bolsa de peligro biológico debe contener sólo la muestra de un paciente.

- 1 Ponga el tubo de transporte etiquetado en la bolsa con cierre, al frente de las bolsas de peligro biológico con la almohadilla absorbente. Selle la bolsa.
- 2 Ponga la Solicitud de Análisis Eurofins Diatherix ya completada en el bolsillo de aleta (no de cierre) en la parte de atrás de la bolsa de transporte de peligro biológico.
Verifique que el tubo de la muestra y la solicitud se encuentren en el bolsillo correcto:
 - La solicitud debe encontrarse en la parte de atrás de la bolsa de aletas
 - La muestra debe estar ubicada en la parte del frente de la bolsa con cierre.
- 3 Ponga la bolsa (s) con muestras bio peligrosas, cada una conteniendo sólo una muestra, en la caja de envío de cartón.
Se puede enviar más de una bolsa con muestras en la misma caja.
- 4 Ponga la caja de envío en el Paquete Clínico FedEx® UN 3373 y séllelo.
Se puede poner más de una caja en el Paquete Clínico.
- 5 Adhiera la etiqueta de envío con código de barras al Paquete Clínico FedEx® UN 3373. Guarde la etiqueta de confirmación en sus archivos.
- 6 Llame al 1-800-463-3339 (1-800-GOFEDEX) para coordinar el recogido de el paquete. Escuche al sistema automatizado hasta que éste diga: “en pocas palabras describa la razón de la llamada”. Luego, presione 0 en las tres opciones siguientes hasta que se le conecte con una operadora.
Diga que tiene una Etiqueta Express Pre pagada y facilite su dirección al operador. No se necesita de mayor información.
Si el paquete no puede ser recogido, éste puede ponerse en cualquier buzón FedEx® Drop Box. Se puede localizar cualquier buzón FedEx® Drop Box llamando a FedEx® o en FedEx.com. No lleve este paquete a una Oficina de FedEx® ya que pueden no aceptar este tipo de envíos.

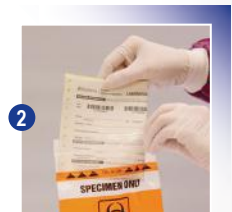

SUGERENCIA: En sus archivos escriba el número de confirmación de recogida en el espacio provisto en la etiqueta de confirmación.